


DESCRIPTION :

Supporte et stabilise la région sacro-lombaire, fortement élastique avec double fermeture abdominale. La ceinture est composée d'une partie trapézoïdale épousant la forme du dos avec fermeture par attache de type velcro sur laquelle deux bandes latérales de serrage sont fixées pour renforcer le maintien lombaire.

CARACTERISTIQUES:

- Possibilité d'ajout de baleine pour renforcer le maintien de la ceinture,
- En tissu élastique conforme,
- Lavable (voir plus bas, entretien),
- Couleur beige.
- Contient du latex naturel
- Ne contient pas de phtalate

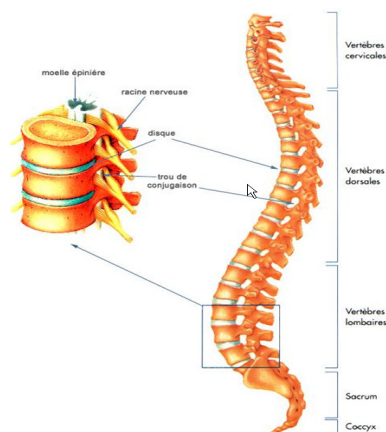

INDICATIONS:

Support lombaire pour lumbago, lombalgies aiguës et chroniques

MODE D'EMPLOI:

1. Dérouler le support et ouvrir tout d'abord la fermeture adhésive des poignées bilatérales.
2. Centrer le support dans le dos, au niveau des lombaires ; l'attache adhésive se trouvant face au corps et sur la droite. Saisir chaque extrémité du support et tirer vers l'avant.
3. Continuer à étirer légèrement et couvrir l'abdomen à l'aide de cette partie gauche du support. Garder le support étiré de cette façon.

4. Dérouler ensuite l'autre partie du support vers l'avant ; fixer le support à l'aide de la fermeture adhésive.
5. Saisir les poignées élastiques latérales, les tirer vers l'avant et les fixer à l'attache adhésive, d'abord à gauche, ensuite à droite.

PARTICULARITES D'UTILISATION:

-

PRECAUTIONS D'EMPLOI:

En cas de gonflement anormal, de décoloration anormale de la peau ou de gêne inhabituelle, nous vous recommandons d'interrompre l'utilisation de la sangle et de consulter un médecin.
La ceinture doit être ajustée parfaitement et confortablement sans entraver la circulation ou la respiration.
Ce produit contient du caoutchouc naturel (latex) qui peut être source d'allergie.
S'assurer que les soins appropriés des plaies ouvertes ou zones infectées soient entrepris avant application.
Être vigilant en présence d'œdèmes fluctuants.

ENTRETIEN :

Veiller à fermer les attaches avant de laver le support. Laver en machine à 30°C (cycle délicat) ou à la main, à l'eau tiède et à l'aide d'un savon doux. Laisser sécher le support à température ambiante. S'assurer qu'elle soit complètement sèche avant de l'utiliser à nouveau.

CONTRE-INDICATIONS:

Lésions lombaires graves.
Personnes allergiques au caoutchouc naturel (latex).

CONDITIONNEMENT:

Présentation unitaire avec notice d'utilisation

Boîte carton unitaire

Présentation pharmacie et hôpital

Adulte

| EAN13 | ACL7 | Référence (*) | Dimensions | Unité de cde | Carton stand. | Code LPPR |
|---------------|---------|----------------|-----------------|--------------|---------------|-----------|
| 4042809015430 | 7843782 | 72819-00004-00 | S/64-77cm | 1 | 30 | |
| 4042809015461 | 7843799 | 72819-00005-00 | M/77-91 cm | 1 | 30 | |
| 4042809015492 | 7843807 | 72819-00006-00 | L/91-107 cm | 1 | 30 | |
| 4042809015522 | 7843813 | 72819-00007-00 | XL /107-122 cm | 1 | 30 | |
| 4042809118193 | 7962908 | 72819-00085-00 | XXL/122-135 cm | 1 | 30 | |
| 4042809118223 | 7962914 | 72819-00086-00 | XXXL/135-152 cm | 1 | 30 | |

(*) les 2 derniers chiffres sont mentionnés à titre indicatif (internes à BSN medical)

STERILISATION:

Produit livré non stérile

BSN medical SAS
57, boulevard Demorieux
F - 72058 LE MANS Cedex 2
Tél.: 02 43 83 40 40
Fax: 02 43 83 40 41

CONTACT PHARMACIE :

N° Vert : 0 800 302 282



- Système de Management certifié
- EN ISO 9001
- EN ISO 13485